


Description de l'afficheur

- 1- Température mesurée
- 2- Mode prise température frontale
- 3- Mode prise température auriculaire
- 4- Mode prise température ambiant/objet
- 5- Mode bébé
- 6- Degré Celsius ou Fahrenheit
- 7- Prise température avec/sans embout
- 8- Mise en mémoire
- 9- Mode silencieux
- 10- Etat charge des piles

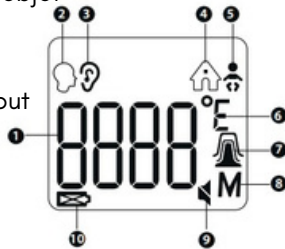


Comment utiliser le thermomètre ABBICARE

Merci de vérifier que les piles fournies soient bien positionnées dans le compartiment (n°9 sur image thermomètre)

Mode prise température frontale

Positionner le thermomètre au milieu du front.

Appuyer sur le bouton de prise de mesure (n°5 sur image) tout en glissant le long du front jusqu'à la tempe.

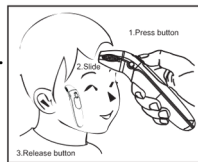

En relâchant le bouton, un bip retentit confirmant la prise de température.

Remarque : la prise de température en mode frontale est indicative. Cette dernière peut fluctuer d'environ un demi-degré Celsius de la température corporelle réelle. Ils existent différents facteurs influençant la précision de la mesure. Vous trouverez dans le paragraphe « **Conseils pour la prise de température** » des indications pour un maniement optimal.

Le front doit être propre. Il peut être nécessaire de le nettoyer, il doit être exempt de toutes saletés ou bien de sueur. Merci de vérifier avant chaque utilisation la propreté de la sonde (n°7 sur image).

⚠ Le thermomètre **ABBICARE™** ainsi que la personne à mesurer doivent se trouver dans la même pièce au moins une demi-heure avant la prise de température.


Mode prise température auriculaire

Ôter le cache ou couvercle (n°1 sur image) du thermomètre. Insérer la sonde dans le canal auditif. Appuyer sur le bouton de prise de mesure (n°5 sur image).

Un bip retentit, la température s'affiche alors à l'écran.

⚠ L'oreille doit être propre avant la prise de mesure.

Il existe une différence de température prise entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Par conséquent, nous conseillons de toujours prendre la mesure dans la même oreille.

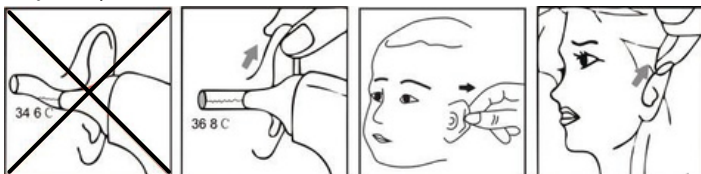

Comme sur les images ci-dessus, merci de tirer l'oreille vers le haut et l'arrière (pour les adultes et enfants de plus d'1 an) afin de permettre une prise de mesure direct sur le tympan.

⚠ Insérer délicatement la sonde dans le canal auditif afin de ne pas endommager le thermomètre et éviter de blesser la personne.

⚠ Prendre les précautions nécessaires avec un enfant. Son canal auditif étant plus petit que celui d'un adulte.

Mode prise température ambiant ou objet

En position éteint, appuyer sur le bouton réglage (n°3 sur image) pendant 3 secondes jusqu'à l'apparition sur l'écran de l'icône 🏠. Placer ensuite le thermomètre entre 1 à 5 cm de l'objet, appuyer sur le bouton mesure (n°5 sur image). Un bip retentit, la mesure s'affiche alors sur l'écran.



Mode bébé

Ce mode est adapté à la prise de température sur les nourrissons âgés de 0 à 36 mois. Il suffit d'appuyer sur la touche mode bébé (n°4 sur image) lors de la mise en fonctionnement du thermomètre **ABBICARE™**.

Après chaque mesure

Après chaque utilisation, la sonde (n°7 sur image) doit être nettoyée avec un chiffon doux ou un coton-tige imbibé d'alcool. Il est préconisé ensuite d'attendre au moins 10 minutes avant de prendre une nouvelle mesure.

⚠ Le thermomètre **ABBICARE™** étant sensible à la température ambiante, évitez de le manipuler longuement pour ne pas fausser la prise de mesure.

Après chaque mesure, vous pouvez utiliser le mode mémoire pour consulter les précédents relevés.

Mode mémoire (jusqu'à 35 enregistrements)

Le thermomètre éteint, appuyer brièvement sur le bouton réglage (n° 3 sur image) pour passer en mode mémoire. Appuyer de nouveau sur le bouton afin de faire défiler les mesures enregistrées. En l'absence de données mémorisées, le symbole « —M » s'affichera sur l'écran.

Mode silencieux

Pour passer d'un mode à l'autre (non silencieux/silencieux), allumer le thermomètre puis maintenir appuyer 2 à 3 secondes le bouton réglage (n°3 sur image).



Celsius ou Fahrenheit

Le thermomètre allumé, appuyer brièvement sur le bouton réglage (n° 3 sur image) pour convertir en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit.

Lecture de la température mesure

Après une prise de mesure, la température s'affichera sur l'écran LCD sous 3 couleurs possibles:

Pas de fièvre	Légère fièvre	Forte fièvre
Entre 32 et 37,3°C	Entre 37,4 et 37,9°C	Entre 38 et 42,9°C
long bip	3 bips courts	5 bips courts
+0,5°C rectale	+0,5°C rectale	+0,5°C rectale

Ajustement de la température

Le thermomètre allumé, appuyer simultanément sur le bouton réglage (n°3 sur image) et sur le bouton mode bébé (n°4 sur image) pendant 5 secondes afin de basculer en mode ajustement.

Appuyer de nouveau sur le bouton réglage (n°3 sur image) pour sélectionner l'écart de température souhaitée : jusqu'à plus ou moins 2 degrés.

Pensez à réajuster à plus ou moins 0 degré pour annuler toute modification.

Arrêt du thermomètre

Après 10 secondes d'inactivité, le thermomètre s'éteint automatiquement. Sinon, en appuyant de 5 à 7 secondes sur le bouton de mesure (n°5 sur image), le mode éteint s'active.

⚠ Attention :

En cas de retrait des piles, les données enregistrées seront complètement effacées. L'ensemble des paramètres du thermomètre seront réinitialisés par défaut.

Changement des piles

Retirer le couvercle du compartiment (voir n°9) et insérer 2 piles AAA dans le sens indiqué.

Nous vous conseillons de retirer les piles en cas de longue période prévue d'inactivité.

Conseils pour la prise de température

La manière la plus correcte de diagnostiquer un état fiévreux est de connaître la température de la personne en temps normale. Il est préférable de relever la température à deux reprises dans la journée : tôt le matin et en fin d'après-midi. Il est préconisé de toujours prendre la température au même endroit afin d'éviter des données différentes.

*Il existe une différence de 0,5°C en moins sur la prise de température avec un thermomètre rectal. Si vous utilisez notre thermomètre **ABBICARE™** en mode frontal principalement, vous pouvez ajuster le résultat (**voir rubrique n°10**) afin d'obtenir le même résultat qu'une prise de mesure rectale.*

Différents facteurs externes peuvent influencer les résultats obtenus en mode auriculaire :

- Couvrir les oreilles avant une prise de mesure
- Être allongé d'un côté de la tête
- Être exposé à des températures très chaudes ou au contraire très froides
- Prendre sa température après un bain ou après une séance de nage

Pour ces cas, il est préférable de patienter au moins 20 minutes avant de prendre sa température.

⚠ Ne pas effectuer de prise de température sur une oreille traitée (avec présence de liquide dans le canal auditif).

Il est déconseillé de garder en main le thermomètre avant de l'utiliser afin d'éliminer un résultat plus élevé. Une trousse est fournie pour son rangement et aussi pour le réserver entre 2 mesures.


Il est préconisé de rester dans un état stable dans une même pièce au moins 30 minutes avant de manipuler le thermomètre et de mesurer la température.

Il est recommandé dans les situations suivantes de prendre entre 3 et 5 prises de mesure au même endroit et de garder la plus haute pour référence :

- dans les 100 premiers jours du nouveau-né
- pour un nourrisson de moins de 3 ans avec un système immunitaire affaibli
- lors des premières utilisations du thermomètre afin de s'y familiariser

Entretien et nettoyage

Utiliser un tampon ou un coton-tige imbibé d'alcool à 70° pour nettoyer le boîtier, le capteur et la sonde du thermomètre. Puis laisser sécher avant toute manipulation ou prise de mesure.

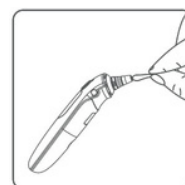

⚠ Aucun liquide ne doit pénétrer à l'intérieur du thermomètre. De même l'utilisation de produit abrasif, diluant ou benzène pour son entretien est strictement interdite. Veuillez enfin à ne pas rayer la surface de l'écran LCD.

Garantie et service après-vente

Notre thermomètre **ABBICARE™** est garanti 12 mois à compter de la date d'achat, en cas de dommages naturels et non d'origine humaine.

La garantie ne couvre pas les piles, l'emballage et tout dommage causé par une mauvaise utilisation.

Les défaillances suivantes, causées par l'utilisateur, sont exclues de la garantie :

- défaillance due à un démontage ou une modification non autorisée.
- défaillance due à une chute inattendue pendant l'utilisation ou le transport.
- défaillance due au non-respect des instructions du manuel d'utilisation.

Nous contacter : boutiqueabkfrance@gmail.com

ABBICARE™
Essentiels®